



relax way  
my



# NECK MASSAGER II



## < relaxmyway

С момента основания в 2000-м году бренд CASADA представляет продукцию высокого класса в области оздоровления и фитнеса. Сегодня продукция CASADA доступна в 37-ми странах по всему миру.

Отличительными чертами продукции CASADA являются её непрерывное развитие, неповторимый дизайн и абсолютное внимание улучшению качества жизни, а также её надёжное и отличное качество.

## Поздравляем!

Благодаря покупке этого массажёра вы позаботились о своём здоровье.

Для того чтобы как можно дольше пользоваться преимуществами вашего массажёра, просим вас внимательно прочитать и соблюдать инструкции по эксплуатации.

Желаем вам получить нескончаемое удовольствие от использования вашего персонального массажёра для шеи Neck Massager II.

### **ВНИМАНИЕ!**

**Массажер не является лечебным или профилактическим прибором и не предназначен для медицинской реабилитации!**

## Содержание

28	Инструкции по технике безопасности
28	Комплект поставки
28	Ввод в эксплуатацию
29	Технические данные
29	Особенности / Комплектация
30	Обращение
30	Панель управления
30	Поиск и устранение неисправностей
31	Хранение / Техническое обслуживание
31	Декларация соответствия требованиям
31	Условия гарантии

# Инструкции по технике безопасности



**Просим ознакомиться со следующими инструкциями перед использованием вашего массажёра для того, чтобы обеспечить его бесперебойную работу и оптимальную эффективность. Пожалуйста, сохраните эту инструкцию по эксплуатации для дальнейшего использования!**

- Массажное устройство соответствует общепринятым техническим принципам и последним правилам техники безопасности.
- Данное устройство не требует какого-либо профилактического ремонта. Любые возможные ремонтные работы могут выполняться только компетентным техническим персоналом. Неправильное использование и несанкционированный ремонт не допускаются по соображениям безопасности и приводят к потере гарантии.
- Запрещается прикасаться к разъёму электропитания влажными руками.
- Избегайте контакта устройства с водой, воздействия высоких температур и прямых солнечных лучей.
- Во избежание опасности короткого замыкания отсоедините кабель питания, если он не используется в течение длительного периода времени.
- Не используйте поврежденные кабели, вилки или расшатанные розетки. Если вилки или кабели повреждены, они должны быть заменены производителем, сервисным представителем или квалифицированным персоналом. В случае неисправности немедленно отсоедините устройство от сети. Неправильное использование или использование не по назначению исключают любую ответственность за ущерб.
- Во избежание чрезмерной стимуляции мышц и нервов не превышайте рекомендуемое время массажа в 30 минут.
- Запрещается использовать острые предметы.
- Необходимо воздержаться от любого вида массажа – даже массажа рук – во время беременности или при наличии в массируемой области одной или нескольких из следующих жалоб: недавние травмы, тромботические заболевания, все виды воспалений и отеков, а также рак. Рекомендуется проконсультироваться с врачом перед массажем в целях лечения заболеваний.
- Не используйте устройство во время вождения автомобиля.
- Если вы зависимы от электрических вспомогательных средств, например, кардиостимуляторов, не забудьте проконсультироваться с врачом перед процедурой массажа.
- Вся продукция Casada не является лечебным или профилактическим и не предназначена для медицинской реабилитации. Не используйте массажер в лечебных целях. Рекомендуем проконсультироваться с врачом!

## Комплект поставки

- Массажер Neck Massager II
- Адаптер питания
- Переходник для автомобиля 12 Вольт

## Ввод в эксплуатацию

Подключите адаптер к устройству, а затем подключите адаптер к розетке. Теперь включите устройство с помощью панели управления.

С адаптером для автомобиля Neck Massager II устройство также можно использовать во время путешествия (запрещается использовать во время вождения!). Просто вставьте автомобильный адаптер в прикуриватель.

Масса: 1,5 kg  
 Напряжение:  
 Номинальная мощность:  
 Автоматический рабочий цикл:  
 Сертификаты:

41 x 52 x 15,5 cm

на входе: AC 100-240 ~ 50/60Hz | на выходе: DC 12V, 2A  
 24 Вт  
 15 минут




## Особенности / Комплектация



### РАЗМИНАНИЕ

Кожа и мышцы разминаются либо между большим и указательным пальцами, либо между обеими руками. Эта техника массажа чаще всего применяется для снятия напряжения.

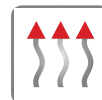

### ПРОГРЕВАНИЕ

Проникающее внутрь и распространяющее тепловое воздействие позволяет глубоко расслабиться. Благодаря глубокому проникновению тепла, эта функция особенно благотворно влияет на напряженные мышцы.



### РЕВЕРС

Функция реверса изменяет направление вращения массажных головок.



### АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ

Специально разработанные автоматические программы для всего тела, которые предусматривают широкий диапазон массажных техник. Кроме того, можно включить функцию прогрева, при желании.



### АДАПТЕР ДЛЯ ПИТАНИЯ ОТ СЕТИ АВТОМОБИЛЯ

Практичный автомобильный адаптер превращает Ваш массажный прибор в мобильный массажиста.

Для вашей безопасности мы обеспечили устройство защитой от перегрева. Тепло образуется в двигателях при работе под высокой нагрузкой и избыточным давлением. До того, как это может привести к какой-либо опасной ситуации, устройство выключается автоматически через 15 минут. Его вновь можно включить через 30-40 минут.

## Обращение

Поместите Neck Massager II на шею, расположив петли впереди на груди. При помощи рук прижмите петли справа и слева и расположите массажёр так, как вам удобно (рисунок 1).

Теперь ваш персональный массажер Neck Massager II готов к использованию. Включите питание, нажав на [ON] для запуска 15-минутной автоматической программы. Массажные головки меняют направление через 1 мин. Функция подогрева включается при запуске, но её можно отключить в любое время, нажав на [HEAT]. Если вы предпочитаете другое направление массажа, его можно поменять с помощью кнопок со стрелками. В этом случае автоматическая программа будет прервана, и устройство переключится на ручной режим.

В качестве альтернативы устройству также можно использовать для массажа бёдер (рисунок 2).



рисунок 1



рисунок 2

## Панель управления



- [1] Вкл/Выкл  
[2] **СТРЕЛКИ**

При нажатии одной из кнопок со стрелкой начинается 15-минутный сеанс массажа. Для изменения направления головок нажмите другую кнопку со стрелкой.

- [3] **HEAT** Вкл/Выкл функцию подогрева  
[4] **AUTO** Вкл/Выкл 15-минутную автоматическую программу

## Поиск и устранение неисправностей

### Дефект

Массажное устройство подключено к сети, однако оно не работает.

### Устранение неполадок

- Проверьте, правильно ли подключён адаптер.
- Устройство может перегреться, если используется постоянно. Оно автоматически остынет для возобновления его нормального состояния. Отключите питание и дайте устройству остыть в течение 30-40 минут.

## Хранение / Техническое обслуживание

При регулярном обслуживании вы можете увеличить срок службы устройства и обеспечить безопасную работу в любое время.

1. Рекомендованные условия хранения: в сухом, незапылённом месте.
2. Храните устройство вдали от жидкостей или открытого огня.
3. Очищайте устройство средствами для ухода за искусственной кожей и сухой мягкой тканью.
4. Отключите устройство от основного источника питания, когда оно не используется.

## Декларация соответствия требованиям

Соответствует европейским нормативным стандартам EMC 2014/30/EC, LVD 2014/35/EC.

## Условия гарантии

Гарантийные обязательства согласно выданному гарантийному талону. При обращении в сервисную службу наличие гарантийного талона обязательно!



Компания «Касада Интернешнл ГмБХ»  
ОбермайерсФельд, 3  
г. Падерборн, Германия, 33104  
info@casada.com  
www.casada.com

Генеральный импортер в России:

ООО «Касада»  
117041, г. Москва,  
ул. Академика Понрягина, дом 21, корпус 1,  
помещение VII, ком 1  
тел: (495) 740-54-25  
Эл. адрес: info@casada.ru  
Адрес в интернете: www.casada.ru

Охраняемые авторским правом изображения и тексты принадлежат компании «Касада Интернешнл ГмБХ» и не могут быть использованы для других целей без специального подтверждения. Авторское право © 2017 Casada International GmbH. Все права защищены.

